



КРЕСЛО-КОЛЯСКА ИНВАЛИДНАЯ БАЗОВАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ

ORTONICA BASE LITE 300



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Мы благодарим Вас за выбор кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 300.



Кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 300 (далее по тексту - Коляска).

Данная модель спроектирована и изготовлена с учетом рекомендаций и пожеланий пользователей.

Коляска - сочетает в себе прочную конструкцию, современные технологии, безопасность и мощность.

Важно!



Прочитайте инструкцию по эксплуатации до того, как начнете пользоваться коляской. Здесь Вы получите важные указания по управлению коляской, которые позволят Вам использовать все технические преимущества коляски.

Компания Ortonica желает Вам приятной и безопасной эксплуатации.



8 (800) 500-14-14



zakaz@ortonica.ru
ortonica.ru



г. Воронеж,
Московский пр-т, 11

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация	4
1.1. Назначение	4
1.2. Примечания	4
1.3. Ответственность	5
1.4. Указания по технике безопасности	5
1.5. Особенности коляски	9
2. Распаковка и сборка	10
2.1. Комплектация	10
2.2. Распаковка и сборка	10
3. Эксплуатация инвалидной коляски	13
3.1. Транспортировка	13
3.2. Пересаживание	14
3.3. Меры предосторожности	15
3.4. Хранение	17
4. Регулировки инвалидной коляски	17
4.1. Передние колеса	17
4.2. Задние колеса	18
4.3. Подножки	19
4.4. Сиденье	20
4.5. Подлокотники	21
4.6. Спинка	23
4.7. Стояночный тормоз	23
4.8. Антипрокидыватели	24
5. Шиномонтаж пневматических шин	25
6. Технические характеристики	26
7. Техническое обслуживание и уход	27
8. Ремонт	28
9. Гарантийный ремонт	29
10. Паспорт изделия	30

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Назначение

Кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 300 (далее по тексту Коляска) предназначена для индивидуального использования людьми с полной или частичной утратой способности передвижения при перемещении самостоятельно или с посторонней помощью.



Условия эксплуатации

Коляска предназначена для перемещения по дорогам с твердым покрытием либо в помещении.

1.2. Примечания

Значение символов

 Обратите внимание	 Важная информация
 Шестигранник № 4; 6; 9	 Воспользуйтесь плоской отверткой
 Гаечный ключ	 Воспользуйтесь крестовой отверткой

1.3. Ответственность



Изготовитель несет ответственность только при использовании изделия в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с данной инструкцией. Изготовитель не несет ответственности за повреждение вследствие использования неразрешенных элементов и запасных частей.

1.4. Указания по технике безопасности



Опасность опрокидывания вследствие изменения диаметра / параметров установки колес. При изменении размера и параметров установки поворотных колес, а также размера приводных колес на высокой скорости может начаться вибрация поворотных колес, что может привести к их блокированию и опрокидыванию инвалидной коляски. В этой связи на инвалидной коляске допускается использование только оригинальных запасных частей от Изготовителя, предназначенных именно для этой модели инвалидной коляски .

Опасность падения вследствие соскакивания приводных колес. Постоянно следите за правильной регулировкой вставных осей на приводных колесах. При ненажатой кнопке на вставной оси съём приводного колеса должен быть невозможен.

Опасность получения ожогов при обращении с огнем. Обивка сиденья и спинки может воспламениться. Необходимо держаться на удалении от любых источников возгорания, в особенности от непотушенных сигарет.

Соблюдайте осторожность при использовании коляски при экстремальных высоких и низких температурах. При прямом попадании солнечных лучей или при интенсивном воздействии источника тепла детали коляски могут нагреться. При использовании коляски при отрицательных температурах может возникнуть опасность переохлаждения организма пользователя.



Следует помнить, что при недостаточном опыте использования инвалидной коляски существует вероятность падения и возникновения опасных ситуаций. Рекомендуем перед началом активного использования коляски тренироваться в обращении с ней. Оцените влияние центра тяжести на поведение инвалидной коляски, например, на склонах, подъемах. При преодолении бордюров и неровностей дороги обязательно воспользуйтесь помощью сопровождающего лица. Эксплуатация инвалидной коляски без антипрокидывателей запрещена!



Опасность опрокидывания при преодолении подъемов. При преодолении подъемов и препятствий на подъемах наклоняйте тело вперед, смещая тем самым центр тяжести. При эксплуатации коляски старайтесь сохранить центр тяжести, слишком сильные наклоны могут привести к опрокидыванию или перевороту коляски.

Опасность вследствие неправильного использования стояночного тормоза. Стояночные тормоза не являются рабочими тормозами. Не допускается их использование в движении. Внезапная блокировка инвалидной коляски при движении может привести к опрокидыванию.

Помните о том, что при остановке на наклонном участке дороги, существует вероятность самопроизвольного отката коляски. При остановке следует фиксировать приводные колеса стояночными тормозами.

Использование коляски в темное время суток. В темное время суток носите как можно более светлую одежду или одежду со светоотражателями, чтобы Вас было лучше видно. Не снимайте светоотражатели с инвалидной коляски.

Перед посадкой в коляску убедитесь в том, что давление в шинах правильное. Давление должно соответствовать маркировке на боковой поверхности покрышек. При одинаковой величине давления в шинах управлять инвалидной коляской легче и удобнее.

Опасность неправильной установки приводных колес. Постоянно следите за правильной установкой приводных колес. Быстроразъемные оси должны быть установлены до щелчка.

Опасность опрокидывания на склонах. Проезжая такие участки, заблаговременно снижайте скорость, и, пересекая их, не притормаживайте, так как неравномерное торможение приводных колес может привести к развороту или опрокидыванию.

Опасность опрокидывания при переустановке приводных колес в крайние положения. В таком случае возможно опрокидывание даже на ровной поверхности. Для инвалидов с ампутацией бедра приводные колеса должны быть обязательно переставлены назад!

Опасность аварии при слишком низком/слишком высоком давлении в шинах. Ходовые качества коляски зависят от величины давления в шинах. Эффективность стояночных тормозов обеспечивается только при достаточном давлении воздуха в шинах.

Опасность аварии при использовании изношенных покрышек. Недостаточная высота рисунка протектора снижает сцепление. Помните, что при передвижении по улицам, Вы подпадаете под действие Правил дорожного движения.

Опасность получения травм рук. Во избежание травм рук беритесь только за обод приводных колес, не касайтесь пальцами спиц.

Опасность падения при самостоятельном преодолении лестниц. Для преодоления лестниц воспользуйтесь помощью сопровождающего лица. Лестницы, не оборудованные въездными пандусами или подъемниками, должны преодолевать только с помощью двух помощников.

Опасность падения при неправильном удерживании инвалидной коляски. Сопровождающие лица должны удерживать инвалидную коляску только за ручки для сопровождающего лица. Если Ваша коляска оснащена регулируемыми по высоте ручками для сопровождающего лица, следите за тем, чтобы они были надежно закреплены.



Опасность получения травмы при посадке. При пересаживании следует заранее поднять опоры для стоп вверх и откинуть подножки.

Опасность получения ожогов вследствие трения. При эксплуатации коляски пользуйтесь кожаными перчатками, улучшающими сцепление и защищающими пальцы от ожогов при торможении ободом колеса.



Для безопасной эксплуатации инвалидной коляски необходимо соблюдать меры предосторожности и следовать правилам техники безопасности.

1.5. Особенности коляски

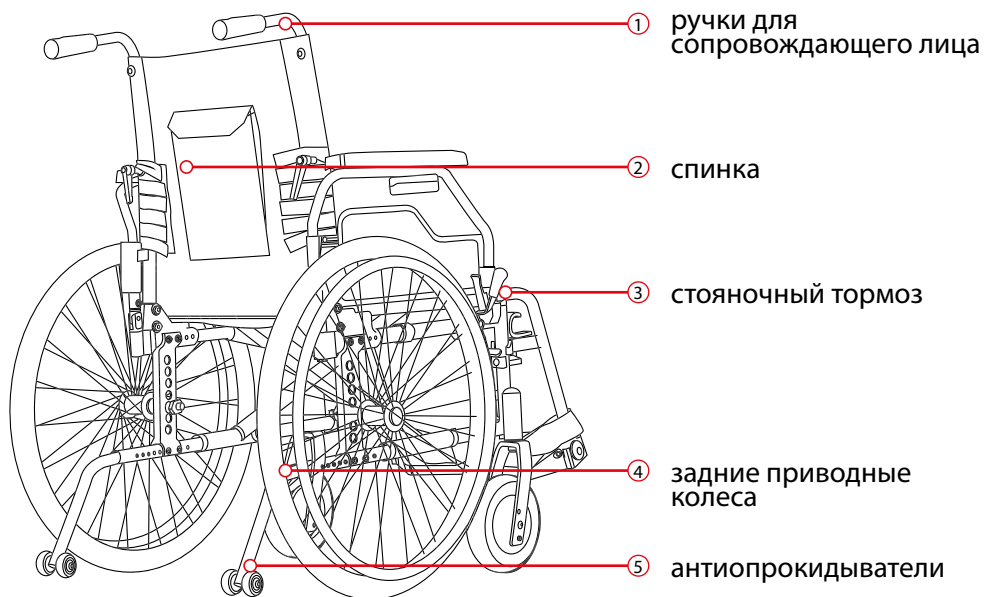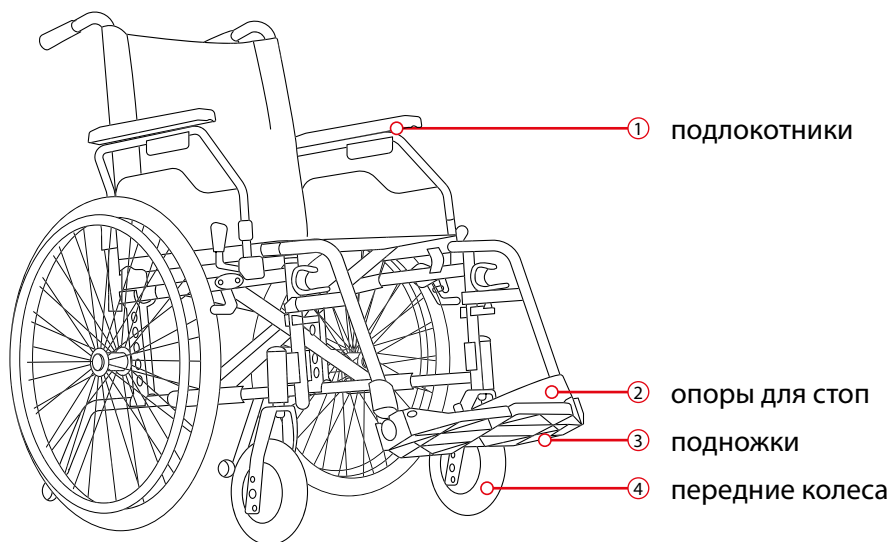

2. РАСПАКОВКА И СБОРКА

2.1. Комплектация

Наименование	Количество, шт
Картонная коробка	1
Кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 300	1
Инструкция по эксплуатации	1
Насос (комплектуется при наличии пневматических шин)	1

2.2. Распаковка и сборка




Коляска упакована в картонную коробку, которую мы рекомендуем сохранить. Поставка инвалидной коляски осуществляется в полностью готовом к эксплуатации и сложенном состоянии. В случае отсутствия каких-либо деталей или при обнаружении поврежденных частей, свяжитесь с компанией Ortonica или Вашим региональным представителем.

Достаньте все детали из коробки. Для приведения коляски в состояние эксплуатационной готовности достаточно выполнить несколько простых ручных операций:

1. Установите задние колеса (рис. 1). Для установки задних колес нажмите кнопку (рис. 1) на соответствующей вставной оси и, взявшись пальцами за спицы, вставьте ось колеса до щелчка.


Рис. 1

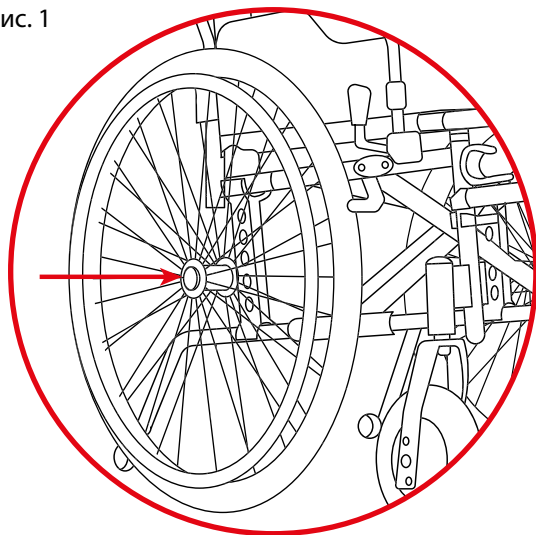

При сборке обязательно следите за тем, чтобы все фиксаторы защелкивались в соответствующих гнездах, а вставные оси приводных колес были зафиксированы в приемных втулках. При ненажатой кнопке приводные колеса должны надежно удерживаться в приемной втулке.


2. Установите подножки в крепления на раме (рис. 2).

Рис. 2

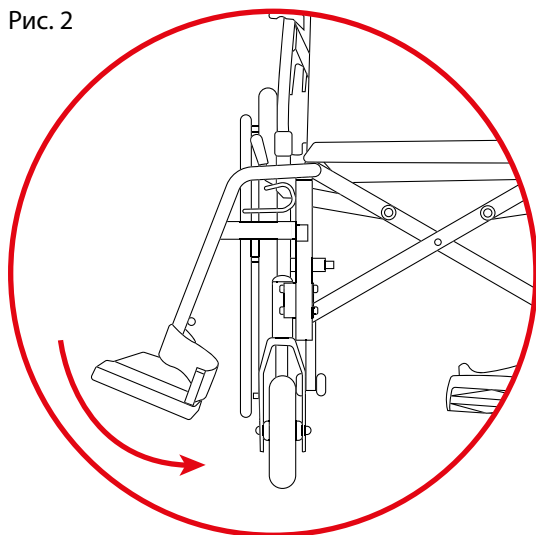


3. Разложите коляску – нажмите ладонями на трубы сиденья (рис. 3).

Рис. 3

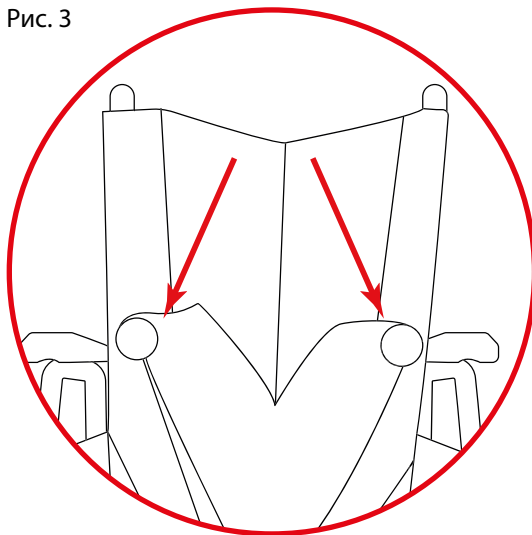

4. Откиньте вниз опоры для стоп (рис. 4).

Рис. 4

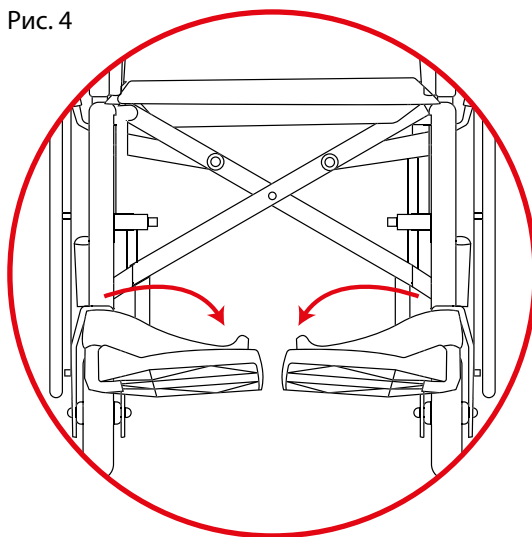


3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ

3.1. Транспортировка


Откиньте подножки, потянув вверх за фиксатор (рис. 5) и, повернув подножки в бок, снимите их с коляски движением вверх (рис. 5).

Рис. 5

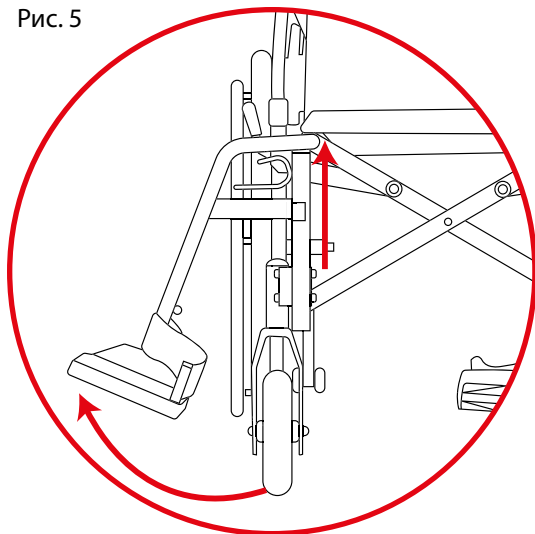


Сложите коляску, потянув за центр сиденья (рис. 6).

Рис. 6

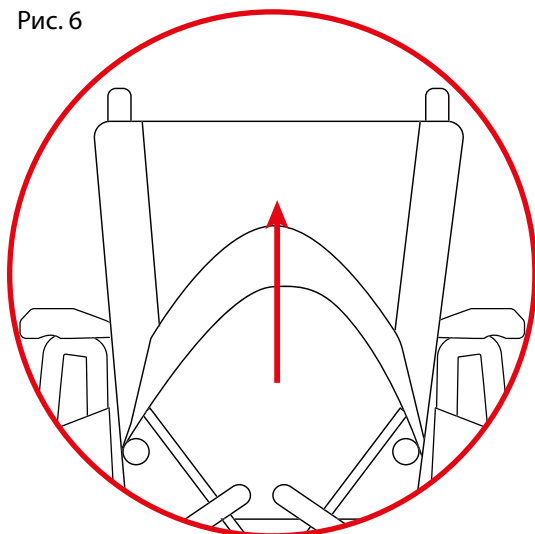

Для облегчения транспортировки снимите приводные колеса, нажав на кнопку вставной оси (рис. 7) и потянув колесо на себя.

Рис. 7

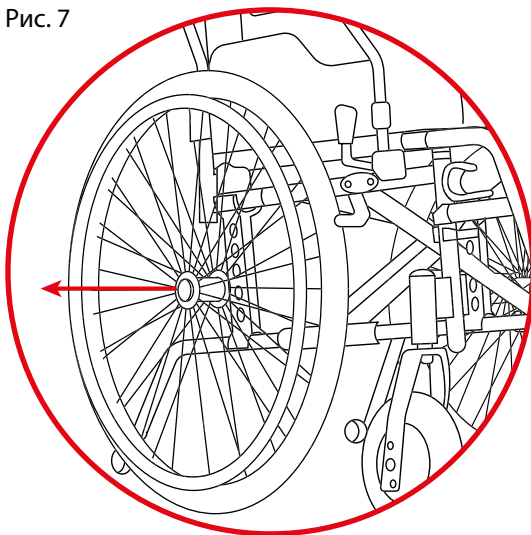

3.2. Пересаживание



Помните, что, совершая пересаживание, во всех случаях лучше воспользоваться сторонней помощью, чтобы предупредить возможность получения травм.

Рис. 8


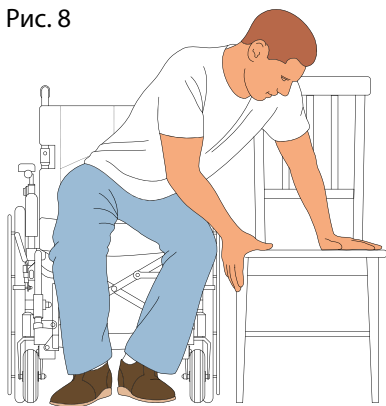


Рис. 9

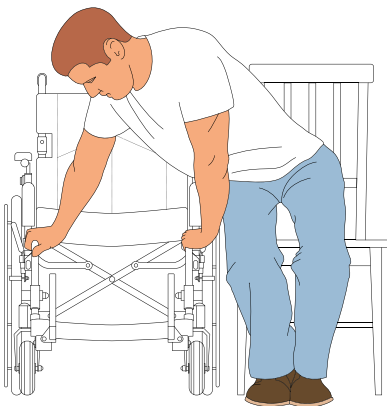

Общие правила пересаживания:


1. Как можно ближе расположите коляску к месту пересаживания (рис. 8) либо к себе, если пересаживаетесь в коляску (рис. 9).
2. Пересаживание осуществляйте только на ровных поверхностях, избегая наклонные.
3. Заблокируйте колеса ручными тормозами.
4. Откиньте подлокотники.
5. При пересаживании из коляски опустите ноги с опоры для стоп на пол и, удерживаясь руками за устойчивую опору, не зависящую от коляски, перенесите вес тела на руки и осуществите высадку из коляски (рис. 8). При пересаживании в коляску необходимо упереться одной рукой на подножку коляски и совершить пересаживание (рис. 9).

3.3. Меры предосторожности

Наклон в бок


Следите, чтобы грудь не выходила за пределы заднего колеса. При перемещении веса тела слишком глубоко (рис. 11) возможно опрокидывание. Свободной рукой держитесь за коляску (рис.10).

Рис. 10

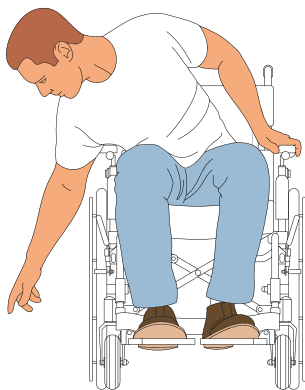

ПРАВИЛЬНО

Рис. 11

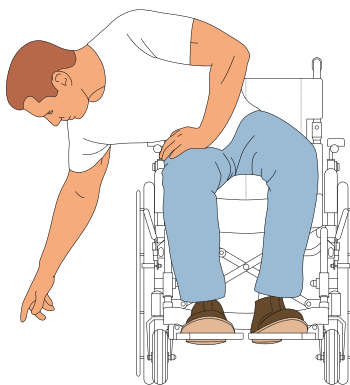


НЕПРАВИЛЬНО

Наклон вперед


При глубоких наклонах вперед грудь не должна выходить за передние колеса (рис.13), это может привести к опрокидыванию. Для большей стабильности свободной рукой держитесь за коляску (рис. 12). При перемещении веса тела вперед не следует пересаживаться на край сиденья.

Рис. 12

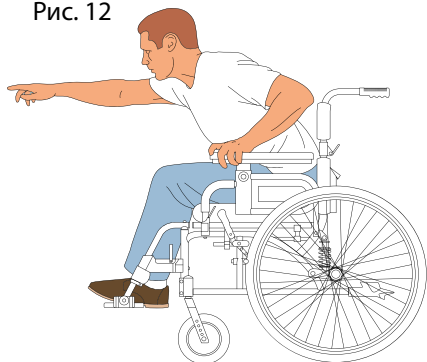

ПРАВИЛЬНО

Рис. 13

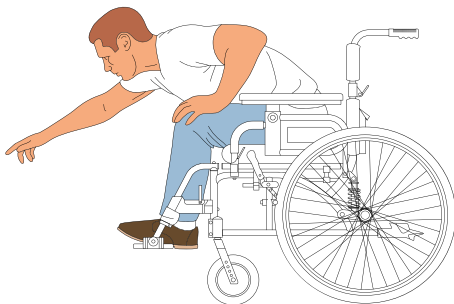


НЕПРАВИЛЬНО

Наклон назад


Следует вплотную сесть к спинке коляски. Выровняйте передние колеса. Установите коляску на стояночный тормоз. Наклонитесь назад, не меняя положения сиденья (рис. 14). Не следует слишком наклоняться назад (рис. 15). Свободной рукой держитесь за коляску.

Рис. 14

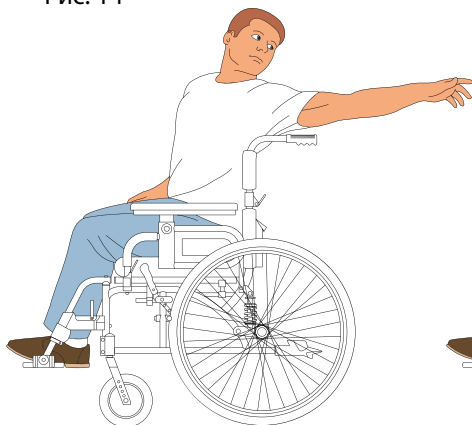

ПРАВИЛЬНО

Рис. 15

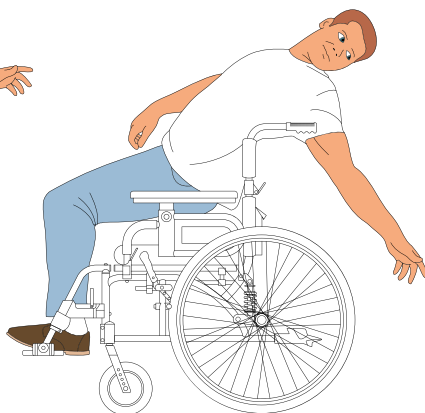

НЕПРАВИЛЬНО

3.4. Хранение

Кресло-коляску следует хранить в сухом месте. При транспортировке или хранении следует соблюдать диапазон температуры окружающего воздуха от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

При длительном хранении кресла-коляски с полиуретановыми шинами нельзя затягивать тормоз с коленчатым рычагом, так как это может привести к деформации шин.

4. РЕГУЛИРОВКИ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ


4.1. Передние колеса



Передние колеса регулируются по высоте. Чтобы отрегулировать передние колеса по высоте, открутите болтовое соединение (рис. 16) и установите ось колеса в нужное отверстие, закрутите болтовое соединение.



Рис. 16

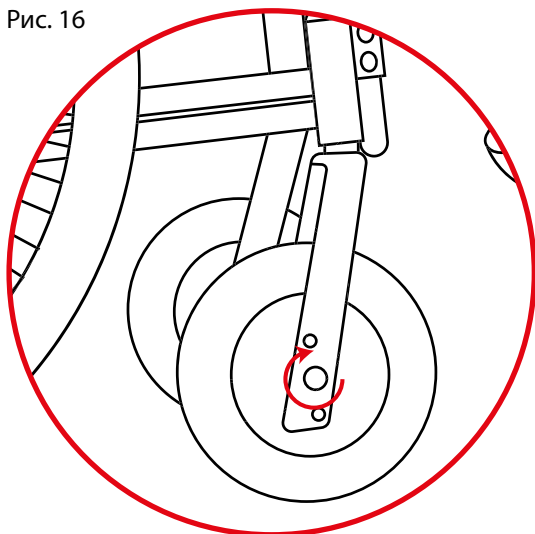


4.2. Задние колеса




Задние колеса регулируются по вертикали и горизонтали (рис. 17). Чтобы отрегулировать задние колеса по вертикали, необходимо снять заднее колесо, открутить гайки накидным ключом и вынуть втулку. Затем вставить втулку в нужное отверстие, туго затянуть гайки и установить задние колеса.

Рис. 17

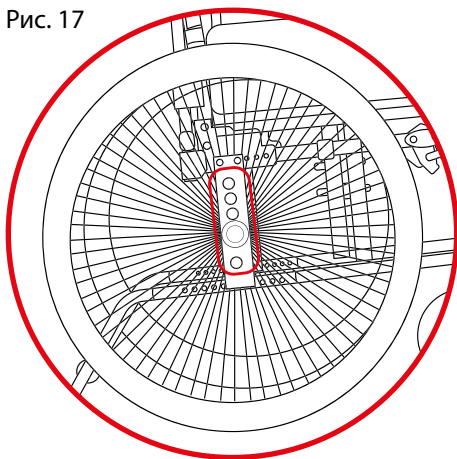

Задние колеса регулируются по горизонтали. С помощью шестигранного и накидного ключа открутите болты сверху и снизу крепления (рис. 18, поз. А). Переставьте крепления в нужное положение, затяните болты.

Рис. 18

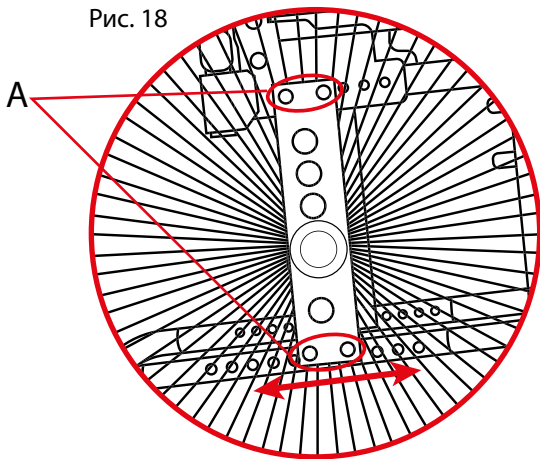


4.3. Подножки



Чтобы отрегулировать длину подножки, необходимо открутить болтовые соединения (рис. 19, поз. А), установить нужную высоту и закрутить болтовые соединения.


Рис. 19

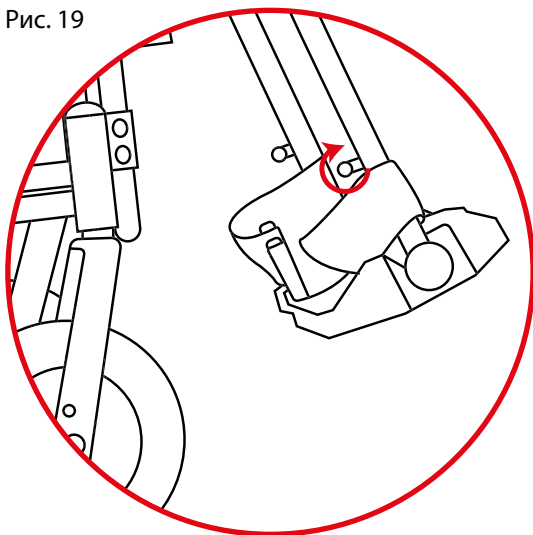

Для регулировки опор для стоп по углу наклона необходимо шестигранным ключом ослабить болтовое соединение (рис. 20) и установить требуемое положение.



Рис. 20

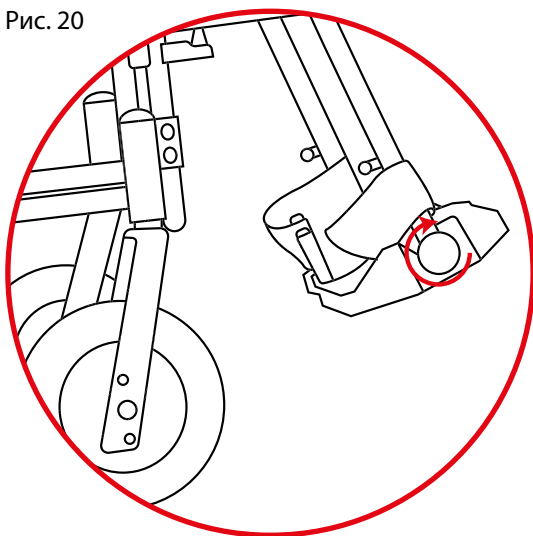

4.4. Сиденье




Сиденье регулируется по глубине и высоте. Высота сиденья регулируется за счет переустановки задних колес. Если Вам необходимо отрегулировать сиденье по высоте, смотрите пункт 4.2.



Чтобы отрегулировать глубину сиденья, необходимо открутить фиксатор под сиденьем (рис. 21, поз. А), установить необходимую глубину. Затем закрутить фиксатор.




Рис. 21

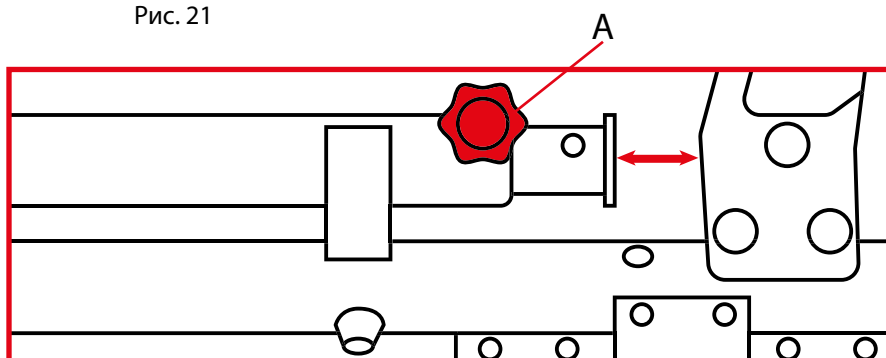

4.5. Подлокотники


Для удобства пересаживания предусмотрены откидные подлокотники. Чтобы откинуть подлокотник, необходимо нажать на фиксатор (рис. 22) и поднять подлокотник вверх.

Рис. 22

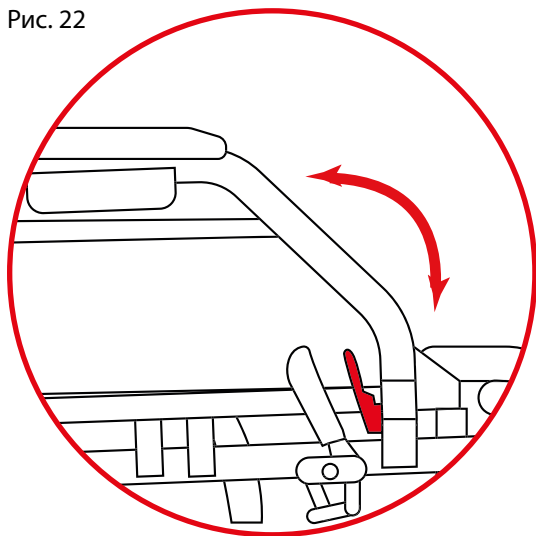

Чтобы снять подлокотник, необходимо отпустить фиксатор спереди (рис. 23, поз. А), затем потянуть за фиксатор сзади (рис. 23, поз. В) и движением вверх снять подлокотник.

Рис. 23

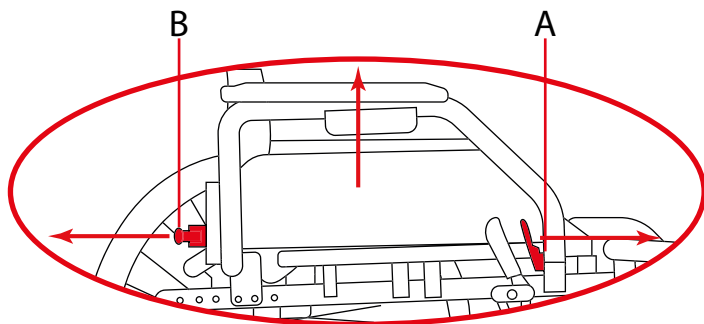



Чтобы отрегулировать подлокотники по горизонтали, открутите регулировочную пластину шестигранным ключом (рис. 24, поз. А), переместите на нужный уровень (рис. 25), затем зафиксируйте регулировочную пластину.

Рис. 24


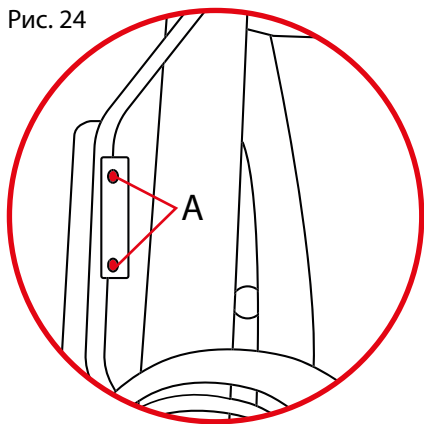


Рис. 25

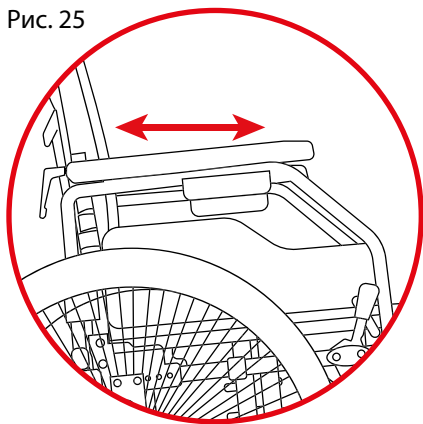

Чтобы отрегулировать высоту подлокотников, необходимо шестигранным ключом открутить регулировочную пластину (рис. 26, поз. А) и установить ее под подлокотную опору (рис. 27, поз. А).

Рис. 26


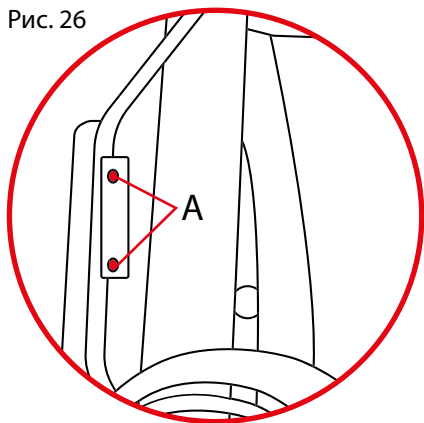



Рис. 27

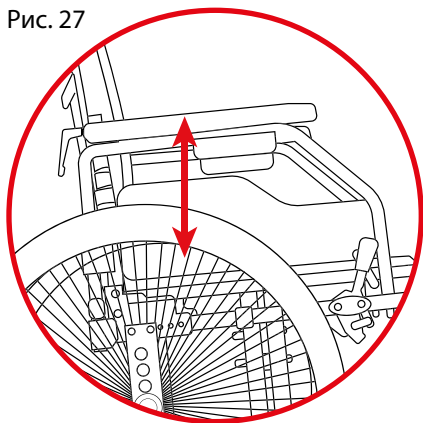

4.6. Спинка

Спинка регулируется по высоте. Чтобы отрегулировать спинку по высоте, необходимо отстегнуть обшивку, затем ослабить регулировочные барашки с двух сторон. Если Вам необходимо увеличить высоту спинки, поднимите трубки вверх, если уменьшить, то опустите трубки вниз (рис. 28). Затяните болтовые соединения.

Рис. 28

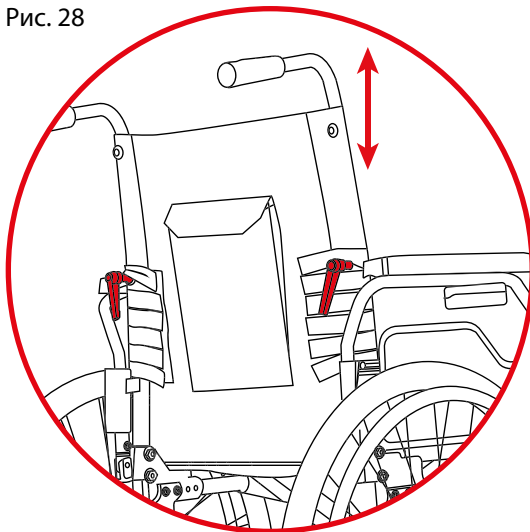


4.7. Стояночный тормоз



Стояночный тормоз можно отрегулировать по горизонтали. Для этого необходимо шестигранным ключом ослабить болтовые соединения (рис. 29, поз. А), затем переместить регулировочный адаптер (рис. 29, поз. В) в нужное положение и затянуть болтовые соединения.


Рис. 29

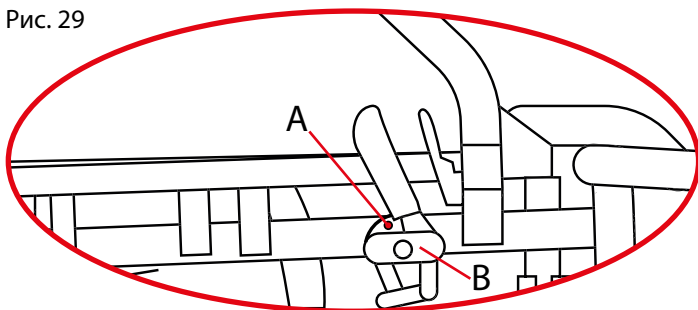

4.8. Антипрокидыватели

Антипрокидыватели на колесной опоре съемные. Чтобы снять антипрокидыватель, необходимо сжать пружинный фиксатор (рис. 30) и вынуть деталь. Для установки антипрокидывателя необходимо произвести действия в обратном порядке. Характерный щелчок подтверждает правильность фиксации.

Рис. 30

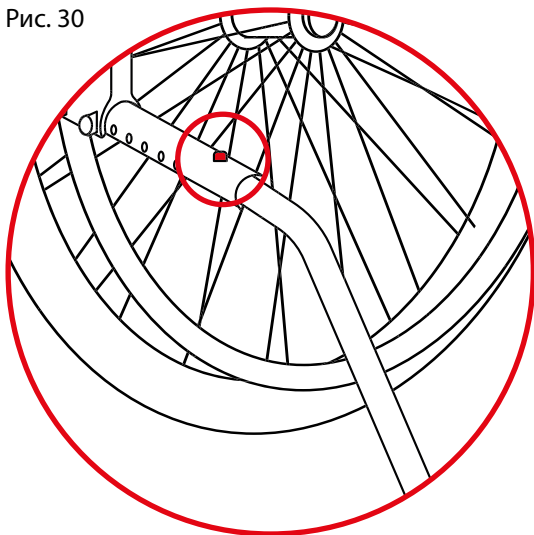

Применение антипрокидывателя:

Антипрокидыватель предотвращает опрокидывание кресла-коляски назад.



Опасность падения при неправильно отрегулированном антипрокидывателе. Зазор между полом и нижним краем роликов антипрокидывателя не должен превышать 5 см.



Опасность опрокидывания. Никогда не преодолевайте препятствия (лестницы и бортовые камни тротуара) по диагонали. Всегда подъезжайте к препятствиям прямо (под углом 90 градусов).

Преодоление порогов/пониженных тротуарных бордюров. Если преодолевается препятствие снизу вверх, колесики антипрокидывателя становятся на землю и предотвращают опрокидывание назад.

5. ШИНОМОНТАЖ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН

На случай аварийной ситуации рекомендуем иметь с собой ремкомплект и насос. Есть две причины, по которым может снижаться давление воздуха в шинах: первая – прокол в камере, вторая – вторая разгерметизация вентиля.

Если на Вашей коляске спускает шина по причине прокола камеры, следует действовать по следующему алгоритму:

1. Запомните положение покрышки относительно обода колеса (выполнение этого пункта облегчит поиск предмета, который послужил причиной прокола).
2. Нажав любым подходящим предметом (отвертка, ручка, замочный ключ и т.п.) на золотник ниппеля, полностью стравите воздух из камеры.
3. Снимите с колеса шину с камерой, аккуратно поддевая ее за край гаечным ключом. Не рекомендуется использовать острые предметы (например, отвертку), поскольку можно повредить камеру.
4. Накачайте в камеру воздух, чтобы найти место прокола. Дополнительно можно воспользоваться мыльным раствором или емкостью с водой.
5. Зачистите место прокола. Очистите и обезжирьте спиртосодержащим составом место прокола.
6. Прикрепите заплатку и сильно прижмите.
7. Найдите причину прокола на шине (для облегчения поиска наложите камеру на шину и место заплатки покажет место прокола). Извлеките из шины при наличии инородный предмет, послуживший причиной прокола.
8. Уложите бандажную ленту на все спицы.
9. Немного накачайте камеру, расправив складки, и установите камеру обратно, начав с вентиля.
10. Проверьте, чтобы камера не образовывала складок.
12. Проверьте отсутствие защемления камеры и правильную установку ниппеля.
12. Накачайте камеру до степени, при которой ее можно сдавить пальцами. Проверьте расстояние по обе стороны покрышки и по всей окружности, оно должно быть одинаковым. Накачайте камеру до рабочего давления и плотно заверните колпачок. Рекомендуемый уровень кПа смотрите на маркировке шин.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина сиденья (варианты исполнения), мм	380	410	430	460	480	510
Общая длина, мм	965-1120	965-1120	965-1120	965-1120	965-1120	955-1110
Высота спинки (регулируемая), мм	450-550	450-550	450-550	450-550	450-550	450-550
Глубина сиденья, мм	420	420	420	420	420	420
Общая ширина, мм	565	565	605	630	660	690
Общая высота, мм	885-1105	885-1105	885-1105	885-1105	885-1105	885-1105
Грузоподъемность, кг	130	130	130	130	130	130
Вес, кг	16,9	16,9	16	17,2	16,3	17,2



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Техническое обслуживание и уход – это работы, направленные на поддержание работоспособности кресло-коляски.

Ответственность за своевременное проведение данных работ лежит полностью на пользователе кресло-коляски.

Периодичность проведения, а также наименование работ по техническому обслуживанию и уходу указаны в Таблице № 1.

Таблица № 1. Периодичность проведения, а также наименование работ по техническому обслуживанию и уходу кресло-коляски Base Lite 300.

Наименование работ	Периодичность проведения		
	Перед каждой поездкой	После каждой поездки	Каждые 30 дней эксплуатации
Проверка давления в пневматических шинах, при необходимости подкачка	•		
Проверка износа шин, при предельном износе (износ протектора ~ 90 °) замена	•		
Протяжка резьбовых соединений			•
Протяжка спиц в приводных колесах			•
Мойка, чистка		•	

Моечно-очистные работы включают в себя следующие операции:

- Демонтаж колес и очистка осей крепления колес от грязи, и инородных предметов, имеющих свойство наматываться при эксплуатации коляски, что приводит к замедлению движения и способствует интенсивному износу осей (волосы, трава и т.п.);
- Мойка покрышек и пластиковых элементов неагрессивными чистящими средствами;
- Чистка обивки и ремней с использованием теплой воды и неагрессивных моющих средств при помощи губки или мягкой щетки;

- Влажная очистка пластмассовых деталей, элементов рамы, ходовой части и колес. Допускается влажная чистка агрессивными чистящими средствами, после чего элементы коляски необходимо хорошо высушить.

8. РЕМОНТ

Ремонт – это работы направленные на восстановление работоспособности кресло-коляски.

Ремонт и сервисное обслуживание инвалидной коляски Ortonica могут выполняться исключительно в сервис-центре компании Ortonica. Выполнение ремонтных работ осуществляется оригинальными запасными частями компании Ortonica.

Получить информацию о проведении ремонтных работ и обслуживании кресла-коляски, а также узнать стоимость и возможность приобретения запасных частей можно в сервисном центре компании Ortonica или у Вашего регионального представителя.

Контроль	Перед каждой поездкой	Ежемесячно	Ежеквартально
Функционирования тормозов	•		
Провисания обивки сиденья и спинки		•	
Регулировки головки вилки поворотных колес		•	
Прочности крепления подставки для ног		•	
Визуальный контроль: Быстроизнашивающихся частей (например, покрышек колес, подшипников)		•	
Степени загрязнения подшипников		•	
Обручей на предмет повреждений		•	
Давления в шинах (см. маркировку на покрышке)		•	
Степени износа деталей складной рамы		•	
Натяга спиц в приводных колесах			•
Резьбовых соединений			•

9. ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Гарантийный ремонт – это работы, направленные на бесплатное восстановление работоспособности кресло-коляски в период действия гарантийного срока.

Гарантийный срок на кресло-коляску Base Lite 300 составляет 12 месяцев с момента поставки первому пользователю.

Максимальный срок выполнения работ по восстановлению работоспособности кресло-коляски в период действия гарантийного срока составляет 45 дней.

Гарантийные обязательства завод-изготовитель (представитель, продавец) утрачивает перед пользователем (потребителем) в случаях, если неисправность произошла по следующим причинам:

- невыполнение либо не своевременное выполнение технического обслуживания в объемах, требуемых заводом-изготовителем;
- несоблюдение условий и требований инструкции по эксплуатации кресло-коляски;
- самовольной разборки и вскрытия узлов;
- самовольного внесения изменения в конструкцию кресло-коляски;

Гарантия ограничена дефектами производственного характера (дефекты материала, изготовления или сборки) и не распространяется на:

- Регламентные работы при техническом обслуживании, а также на расходуемые при этом материалы;
- Лакокрасочное покрытие (гарантия предоставляется на сквозную коррозию);
- Диски колес, покрышки;
- Нормальный износ и естественное старение любых деталей (покрышки, камеры, фрикционные накладки, текстиль, резиновые и пористые части (подлокотных опор), пластиковые детали;
- Резиновые элементы, обивку и отделку в результате воздействия окружающей среды и нормального использования;

- Слабые звуки, шум, вибрации возникающие в процессе эксплуатации кресло-коляски, которые не влияют на характеристики и работоспособность кресло-коляски;
- Регулировочные работы, включая регулировки ручного тормоза или положения элементов кресло-коляски;
- Запасные части и расходные материалы, приобретённые не у представителя завода-изготовителя;
- Повреждения кресло-коляски в результате дорожно-транспортного происшествия, неосторожности, пренебрежительного обращения;
- Повреждения возникшие в следствии превышения максимально допустимой на кресло-коляску нагрузки;
- Детали и элементы кресло-коляски, которые вышли из строя вследствие механического повреждения различного происхождения, промышленных выбросов и других экологических явлений, солей и других химических соединений, природных воздействий (града, молний, выделений растений и т.п.).

10. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Модель коляски	Кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 300
Производитель	«А Энд Ай Индастриз Лтд Шуньдэ Фошань», Китай, A & I Industries Ltd Shunde Foshan, Liandu Industrial Park, Le Liu Town, Shunde District, Foshan City, China
Регистрационный номер медицинского изделия	РЗН 2021/15163(ЕПУЛ - Г004-00110-00/02934951)
Адрес	394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11
E-mail	445@ortonica.ru
По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться по телефону: +7 (950) 756-67-25	



Гарантия не распространяется на быстроизнашиваемые элементы, такие как - текстиль, резиновые и пористые части (подлокотных опор), пластиковые детали, камеры, покрышки.

Наименование, марка, модель изделия	Кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 300
Серийный номер	
Наименование продавца (с печатью)	
Дата продажи	
С условиями гарантийных обязательств продавца и правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий к внешнему виду и комплектности не имею. (подпись покупателя)	
При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия	

Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не по его вине, например:

- превышение грузоподъемности, указанной в настоящем паспорте;
- сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие предметы;
- наезд на препятствие, высотой более 4 см;
- износ и повреждение колес.

Гарантия предусмотрена на изделие целиком, на отдельные детали гарантия не предусмотрена.



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН



ОДНОКЛАССНИКИ



ВКОНТАКТЕ



YOUTUBE